



Καθημερινή φροντίδα της φωνητικής πρόθεσης.

Provox® Flush

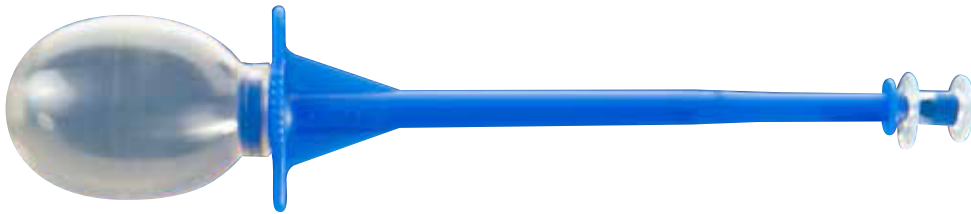


Καθαρίστε την βαλβίδα ομιλίας το πρωί, το βράδυ και μετά απο κάθε γεύμα χρησιμοποιώντας τη βούρτσα και το πουάρ.

1. Χρησιμοποιήστε το πουάρ μόνο με πόσιμο νερό ή αέρα. Μην χρησιμοποιείτε άλλο υγρό πέρα απο νερό.

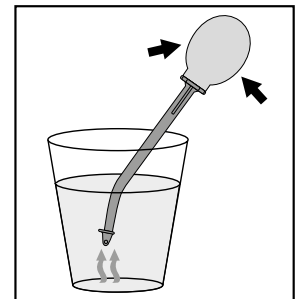

Συμβουλή: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πουάρ με νερό , εξασκηθείτε πρώτα με αέρα. Συνεχίστε με νερό όταν αισθανθείτε σιγουριά. Προσοχή: αποφύγετε την εισαγωγή νερού στην τραχεία.

2. Τοποθετήστε το μυτερό άκρο του πουάρ σε ενα ποτήρι με νερό και πιέστε το διάφανο στρογγυλό σιλικονούχο μέρος του πουάρ.
3. Εισάγετε το μυτερό άκρο του πουάρ στην πρόσθια επιφάνεια της βαλβίδας. βεβαιωθείτε οτι εχει σφραγίσει επαρκώς. Κρατήστε το πουάρ σταθερό με το χέρι σας. Το πουάρ μπορεί να κάμφθει για καλύτερη προσβαση στην βαλβίδα.
4. Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να πιέσετε το διάφανο στρογγυλό δοχείο του πουάρ ωστε να απελευθερωθεί νερό ή αερας μεσα στην βαλβίδα.
5. Στρέψτε το διάφανο δοχείο προς τα πάνω και απελευθερώστε το. Το διάφανο δοχείο θα ξαναφουσκώσει. αφαιρέστε το πουάρ απο την βαλβίδα.
6. Αποσύνδεστε το δοχείο του πουάρ απο το στέλεχος. Καθαρίστε και τα δύο μέρη με πόσιμο νερό και απορρυπαντικό χεριών απο τα υπολείμματα εκκρίσεων και φαγητού. Αφήστε και τα δύο μερη να στεγνώσουν στον αέρα.
7. Απολυμάνετε το πουάρ καθημερινά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Provox Flush.

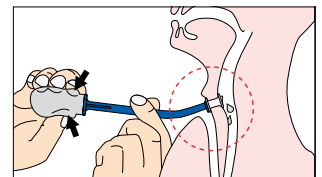

Αναπαύσεως 6 Μέτρ, 11636 Αθήνα
Τηλ: 2109219160, Fax: 2109212460
Email: info@getremed.gr