

Καθημερινός καθαρισμός της φωνητικής πρόθεσης

Pronox® Βούρτσα





Καθαρίστε την βαλβίδα το πρωί, το βράδυ και μετά από κάθε γεύμα χρησιμοποιώντας το πουάρ και τη βούρτσα.

1. Υγράνετε τα τριχίδια από τη βούρτσα και έπειτα τοποθετήστε το ολόκληρο μέσα στην βαλβίδα. Τραβήξτε πίσω τη βούρτσα εάν νιώσετε αντίσταση.
2. Μετακινήστε τη βούρτσα μπρός και πίσω καθώς συγχρόνως την περιστρέφετε με τον τρόπο αυτό θα καθαρίσετε την βαλβίδα ομιλίας.
3. Όταν τελειώσετε :
 - α. Καθαρίστε τη βούρτσα με πόσιμο νερό και απορρυπαντικό χεριών
 - β. Ξεβγάλετε με πόσιμο νερό και αποθηκεύστε όταν στεγνώσει.
4. Αντικαταστήστε τη βούρτσα μια φορά το μήνα ή συντομότερα εάν τα τριχίδια έχουν φθαρεί .

Συμβουλή: Εάν χρειαστεί το μπλέ στέλεχος από τη βούρτσα μπορεί να καμφθεί για καλύτερη πρόσβαση στην βαλβίδα. Μην κάμψετε την μεταλλική κεφαλή από τη βούρτσα. Μην περιστρέψετε τη βούρτσα κατά τον καθαρισμό εάν έχετε κάμψει το στέλεχος.

Συμβουλή: Εάν η βαλβίδα είναι 12.5 χιλ ή μεγαλύτερη τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε XL βούρτσα, εάν η βαλβίδα σας είναι 10 χιλ ή μικρότερη τότε χρησιμοποιήστε την κανονική βούρτσα.

5. Απολυμάνετε τη βούρτσα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης Pronox Brush.

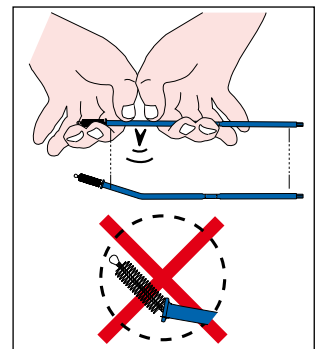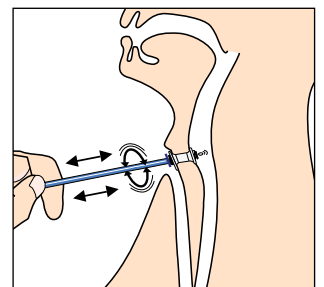

Αναπαύσεως 6 Μέγας, 11636 Αθήνα
Τηλ: 2109219160, Fax:2109212460
Email: info@getremed.gr